


# LD ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

## LD-300, LD-301, LD-302

Little Doctor®

Χρησιμοποιώντας αυτό το θερμόμετρο LD μπορείτε να μετρήσετε γρήγορα, με ακρίβεια και ασφάλεια τη θερμοκρασία του σώματός σας.

Το θερμόμετρο προορίζεται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος ΜΟΝΟ χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

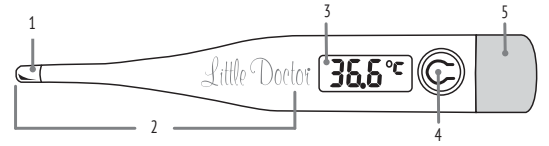

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας, °C	32.0-42.0
Εύρος εμφάνισης θερμοκρασίας, °C	32.0-42.0
Μέθοδος μέτρησης	Μέθοδος αξιολόγησης Ανώτατου ορίου
Όρια σφάλματος απόλυτης μέτρησης θερμοκρασίας, °C	±0.1
Τύπος ανιχνευτή	Thermistorius
Ένδειξη	Οθόνη υγρών κρυστάλλων με ένδειξη στο ένα δέκατο του ενός βαθμού
Μονάδες	Βαθμοί Κελσίου (°C)
Ηχητικό σήμα	Η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί
Μνήμη	Τελευταία μετρούμενη τιμή
Τάση τροφοδοσίας, V	1,5
Πηγή ενέργειας	Μία μπαταρία LR41
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος, MW	0,15
Χρόνος ζωής μπαταρίας	Περίπου 100 ώρες μέτρησης
Αυτόματη διακοπή	Σε 10 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης

Συνολικές διαστάσεις: Διάσταση (χωρίς θήκη), mm Βάρος (χωρίς θήκη),	129x18x10 (LD-300), 129x18x11 (LD-301), 129x19x11 (LD-302) 10 (LD-300), 8 (LD-301), 11 (LD-302)
Πλήρες σετ	Θερμόμετρο με μπαταρία, πλαστική θήκη, εγχειρίδιο σέρβις, συσκευασία
Συνιστάμενο διάστημα βαθμονόμησης	Το πολύ 2 χρόνια
Έτος παραγωγής	Δείτε τον κωδικό LOT (τους πρώτους 4 αριθμούς) στην πίσω πλευρά του σώματος του θερμομέτρου.
Συνθήκες λειτουργίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα, σχετική υγρασία % Rh	Από +10 έως + 35 μέγιστο 85
Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα, σχετική υγρασία % Rh	Από -25 έως +55 μέγιστο 85

### ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το αδιάβροχο μέρος του θερμομέτρου LD-300, είναι μόνο το τμήμα (2) της εικόνας. Αποτρέψτε την είσοδο νερού σε άλλα μέρη της συσκευής. Τα θερμόμετρα LD-301 και LD-302 έχουν αδιάβροχο σώμα που μπορεί να βυθιστεί σε νερό μέχρι το βάθος των 16 cm για μέγιστο 30 λεπτά.
- Αυτό το θερμόμετρο έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της μασχάλης, του στόματος ή του ορθού.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από μικρά μέρη. Αυτά τα μέρη μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία. Χρησιμοποιήστε τα υπό έλεγχο μόνο!

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΜΝΗΜΗ

- Πατήστε το κουμπί σημείο (4) στη εικόνα  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατώντας το κουμπί όλα τα τμήματα θα εμφανίζονται στην οθόνη σημείο (3) εικόνας, όπως φαίνεται στο σχήμα στα δεξιά. Τώρα το θερμόμετρο είναι σε ενεργή κατάσταση.
- Αφήστε το κουμπί. Θα εμφανιστεί η τελευταία ένδειξη θερμοκρασίας. Στη συνέχεια, τα σύμβολα «L °C» θα εμφανιστούν με το σύμβολο flush «°C».
- Βάλτε το θερμόμετρο κάτω από το βραχίονα τοποθετώντας το άκρο στο κοίλο της μασχάλης (ή σε άλλο μέρος - βλ. Ενότητα «Μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασίας».
- Εάν η θερμοκρασία του σώματος υπερβαίνει τους 32,0 °C, θα εμφανιστεί μια τιμή θερμοκρασίας στη θέση των συμβόλων «L °C» με σήμανση «°C» για κάθε περίοδο μέτρησης.
- Εάν οι τιμές θερμοκρασίας δεν αλλάξουν για 16 δευτερόλεπτα, ο δείκτης «°C» θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ηχήσει ένα σήμα μπιπ. Ωρα της μέτρησης εξαρτάται από μια επιλεγμένη μέθοδο μέτρησης (βλ. Ενότητα «Μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασίας»). Εάν η διαδικασία πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Ενότητα «Μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασίας», ένα σήμα ηχητικού σήματος θα δείξει την ολοκλήρωση της μέτρησης. Εάν αμφιβάλλετε για την ακρίβεια του μέτρησής, επεκτείνετε το χρόνο μέτρησης κατά 2-3 λεπτά μετά τον ήχο ενός ηχητικού σήματος. Εάν η μετρούμενη θερμοκρασία είναι κάτω από 32 °C, θα εμφανιστούν σταθερά τα σύμβολα «L °C». Εάν η μετρούμενη θερμοκρασία είναι πάνω από 32 °C, τα σύμβολα «H» θα εμφανιστεί η ένδειξη °C.
- Οι ενδείξεις θερμοκρασίας θα εμφανιστούν έως ότου απενεργοποιηθεί το θερμόμετρο.
- Πατήστε το κουμπί σημείο εικόνας (4) για να απενεργοποιήσετε το θερμόμετρο.
- Εάν ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε το θερμόμετρο, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε περίπου 10 λεπτά.

### ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

#### ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

Απολυμάνετε τον αισθητήρα του θερμομέτρου. Πριν από τη λήψη της θερμοκρασίας, κρατήστε το στόμα κλειστό για 5 λεπτά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το θερμόμετρο κάτω από τη γλώσσα με το άκρο στηριγμένο μέσα. Κλείστε το στόμα. Η στοματική θερμοκρασία πρέπει να ληφθεί για 1 λεπτό.

#### ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟ

Σύρτε απαλά το άκρο του θερμομέτρου στο ορθό. Βεβαιωθείτε ότι η άκρη έχει εισαχθεί στο ορθό όχι περισσότερο από 2,5 cm. Η θερμοκρασία του ορθού πρέπει να ληφθεί για 1 λεπτό.

#### ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ

Πριν από τη λήψη θερμοκρασιών, σκουπίστε το κοίλο της μασχάλης με στεγνή πετσέτα και κρατήστε το βραχίονα σε θέση κάτω για 5 λεπτά. Τοποθετήστε το άκρο καλά στην μασχάλη ενώ πιέζετε το βραχίονα. Η θερμοκρασία της μασχάλης λαμβάνεται για 3-4 λεπτά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Η θερμοκρασία του ορθού πρέπει να είναι 1 βαθμός υψηλότερη από τη στοματική και η θερμοκρασία μασχάλης - 1 βαθμός μικρότερη από τη στοματική. Για οποιοσδήποτε ερωτήσεις συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εάν μια μπαταρία έχει αποφορτιστεί (λιγότερο από 1,4V), θα εμφανιστεί το αντίστοιχο σύμβολο, υποδεικνύοντας έτσι την ανάγκη αντικατάστασης της μπαταρίας.

- Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών σημείο εικόνας (5) σύροντας το κάλυμμα απέναντι από τον αισθητήρα θερμομέτρου.
- Αφαιρέστε την αποφορτισμένη μπαταρία. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα.
- Εισαγάγετε μια νέα μπαταρία διασφαλίζοντας ότι ο θετικός (+) πόλος είναι στραμμένος προς τα πάνω και ο αρνητικός (-) πόλος - κάτω.

### ΕΓΓΥΗΣΗ

Το ακόλουθο προϊόν LD καλύπτεται από εγγύηση για την περίοδο που καθορίζεται στην κάρτα εγγύησης. Οι υποχρεώσεις εγγύησης περιλαμβάνονται στην κάρτα εγγύησης που παρέχεται κατά την πώληση αυτής της συσκευής σε αγοραστή. Οι διευθύνσεις των οργανισμών για τη συντήρηση της εγγύησης αναφέρονται στην κάρτα εγγύησης.

### ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ:

Little Doctor Europe Sp. Z.o.o., 57G Zawila Street, 30-390, Κρακοβία, Πολωνία.  
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: +48 12 2684748, 2684749.

### GUARANTEE CARD

MODEL	Serial №
Name and address of retailer	
Date of Purchase	
Retailer sign	Retailer stamp
I confirm that surface appearance and complete set of device is OK:	
Purchaser sign	



© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2006-2020  
® Registered trade mark of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.