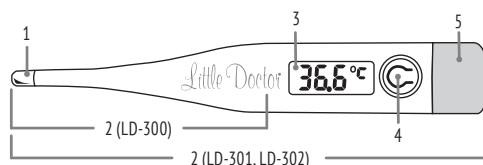


S teplomerom LD môžete rýchlo, presne a bezpečne merať telesnú teplotu človeka.

**⚠ DÔLEŽITÉ!** Tento teplomer je určený IBA na meranie teploty ľudského tela spôsobmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rozsah merania teploty, °C	32.0-42.0
Rozsah zobrazenia teploty, °C	32.0-42.0
Metóda merania	Metóda zistenia maxima
Limity prípustnej absolútnej chyby pri meraní teploty, °C	+0.1
Čítlivý prvok	Termistor
Indikácia	LD displej s indikáciou do desiatín
Merné jednotky	Stupňov Celzia (°C)
Zvukový signál	Na konci merania
Pamäť	Posledné meranie
Napájacie napätie, V	1,5
Typ napájania	1 batéria LR41
Maximálna spotreba energie, mW	0,15
Životnosť batérie	Približne 100 hodín merania
Automatické vypnutie	10 minút po ukončení merania

Celkové rozmery:	
Veľkosť (bez puzdra), mm	129x18x10 (LD-300), 129x18x11 (LD-301), 129x19x11 (LD-302)
Hmotnosť (bez puzdra), g	10 (LD-300), 8 (LD-301), 11 (LD-302)
Kompletná sada	Teplomer s batériou, plastové puzdro, návod na použitie, balenie
Odporúčaný interval kalibrácie	nie viac ako 2 roky
Rok výroby	je uvedený v čísle LOT (prvé 2 čísla) na zadnej strane puzdra teplomeru.
Prevádzkové podmienky:	
teplota okolitého vzduchu, °C	od +10 do +35
relatívna vlhkosť, % relatívnej vlhkosti	15 - 85
Podmienky skladovania:	
teplota okolitého vzduchu, °C	od -25 do +55
relatívna vlhkosť, % relatívnej vlhkosti	15 - 85

## PREVENTÍVNE OPATRENIA

**⚠ DÔLEŽITÉ!**

- Vodotesná časť teplomeru LD-300 je uvedená na obrázku (2). Zabráňte tomu, aby sa voda dostala na iné časti prístroja. Vodotesné puzdro teplomerov modelov LD-301 a LD-302 umožňuje ponorenie do vody do hĺbky najviac 16 cm, nie dlhšie ako 30 minút.
- Teplomer je určený na meranie teploty axilárnymi, orálnymi alebo rektálnymi spôsobmi.
- Malé časti by nemali byť prístupné deťom. Je to nebezpečné pre ich zdravie. Používajte len pod dohľadom dospeljej osoby!

## PORADIE MERANIA, PAMÄŤ

- Zapnite napájanie stlačením tlačidla (4).
- Po stlačení tlačidla na displeji (3) sa rozsvietia všetky segmenty, ako je znázornené na obrázku vpravo, čo znamená, že teplomer je v prevádzkovom stave.
- Uvoľnite tlačidlo. Na displeji sa zobrazí výsledok posledného merania. Potom sa rozsvietia symboly «L °C», zatiaľ čo symbol «°C» by mal blikať.
- Umiestnite snímač teplomeru (1) do podpazušia (alebo na iné miesto, ako je uvedené v časti «Metódy merania teploty»).
- Ak je telesná teplota vyššia ako 32,0 °C, na displeji sa namiesto «L °C» zobrazí hodnota teploty a značka «°C» bude blikať počas celého času merania.
- Keď sa hodnota teploty nezmení po dobu 16 sekúnd, značka «°C» prestane blikať a zaznie zvukový signál. Čas merania závisí od zvolenej metódy merania (pozrite časť «Metódy merania teploty»). Ak sú prísne dodržané požiadavky časti «Metódy merania teploty», zvukový signál upozorní na koniec merania. V prípade pochybností o výsledku by sa pre presnejšie meranie mal čas merania zvýšiť o 2-3 minúty po pipnutí. Ak je nameraná teplota nižšia ako 32 °C, na displeji sa bude neustále zobrazovať «L °C». Ak je nameraná teplota vyššia ako 42 °C, na displeji sa zobrazí symbol «H °C».
- Údaje o teplote sa zobrazia na displeji, kým sa teplomer nevypne.
- Vypnite teplomer stlačením tlačidla (4).
- Ak teplomer nie je vypnutý, automaticky sa vypne asi po 10 minútach.

## VÝMENA BATÉRIE

Ak je napätie batérie nedostatočné na používanie teplomeru (menej ako 1,4 V), na displeji sa zobrazí označenie « $\square$ », ktoré signalizuje potrebu výmeny batérie.

- Otvorte priehradku na batérie (5) potiahnutím krytu v smere opačnom k zsenoru.
- Vyberte starú batériu. Na tento účel nepoužívajte ostré kovové predmety.
- Vložte novú batériu a skontrolujte správne umiestnenie pólů: «plus» by mal smerovať nahor, «minus» - nadol.

## METÓDY MERANIA TEPLoty

## ORÁLNE MERANIE

Vložte senzor do hygienického vrečka (predáva sa samostatne). Pred meraním teploty udržiajte ústa

zatvorené po dobu 5 minút. Umiestnite snímač pod jazyk a držte ho jazykom. Zatvorte ústa. Čas merania teploty touto metódou je približne 1 minúta.

## REKTÁLNE MERANIE

Opatrne vložte iba špičku teplomeru do konečníka. Nevkladajte ho hlbšie ako 2,5 cm. Čas merania teploty touto metódou je približne 1 minúta.

## AXILÁRNE MERANIE

Pred meraním utrite pot v podpazuší suchým uterákom a spustite ruku po dobu asi 5 minút. Umiestnite senzor do podpazušia a pevne stlačte ruku. Čas merania teploty touto metódou je 3 - 4 minúty.

**⚠ DÔLEŽITÉ!** Rektálna teplota môže byť o 1 stupeň vyššia ako orálna a axilárna teplota môže byť o 1 stupeň nižšia ako orálna. Všetky otázky týkajúce sa tohto problému by ste mali prediskutovať s lekárom.

## ZÁRUČNÉ POVINNOSTI

- Pre prístroje LD záručná doba je 12 mesiacov od dátumu predaja.
- Záručné povinnosti sa vydávajú so záručným listom pri predaji prístroja kupujúcemu.
- Adresy organizácií poskytujúcich záručné služby sú uvedené v časti «Výrobca a oprávnení zástupcovia» a na webovej stránke [www.littledoctor.sg](http://www.littledoctor.sg).

## DEKODOVACIE ZNAKY

CE 0123 Súlad so Smernicou 93/42/EHS

CE Zastupiteľská Kancelária v EÚ

⚠ Dôležité: Prečítajte si návod

☒ Vybavenie typu BF

🏭 Výrobca

IP22 Trieda ochrany IP

☂ Chráně pred vlhkosťou

LOT Číslo výrobnéj šarže LOT

SN Sériové číslo

☒ Pri likvidácii postupujte podľa platných predpisov vo Vašom regióne

☒ Podmienky skladovania, prepravy a prevádzky

Dátum vydania tohto Návodu na použitie je uvedený na poslednej stránke vo formulári EXXX/YYMM/NN, kde YY je rok, MM je mesiac a NN je číslo vydania.

## VÝROBCA A AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCOVIA:



Výroba je certifikovaná podľa medzinárodnej normy ISO 13485.

Vyrába sa pod dohľadom a pre Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza 199591, Singapore

**Výrobca:** Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Oficiálny zástupca v EÚ:** Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: [biuro@littledoctor.pl](mailto:biuro@littledoctor.pl))

Podrobnejšie informácie na webovej stránke [www.littledoctor.sg](http://www.littledoctor.sg)

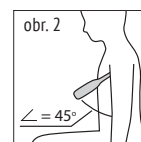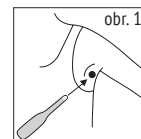

Little Doctor

## ZÁRUČNÝ LIST

MODEL

SÉRIOVÉ ČÍSLO

ZÁRUČNÁ DOBA

MENO KUPUJÚCEHO

PODPIS KUPUJÚCEHO

DÁTUM PREDAJA

PODPIS PREDÁVAJÚCEHO

VYPLNENÉ ZÁSTUPCOM AUTORIZOVANÉHO SERVISNÉHO STREDISKA

PEČAŤ (PEČIATKA) OBCHODNEJ ORGANIZÁCIE