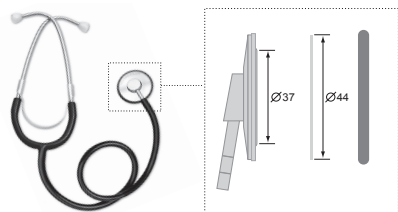


! DÔLEŽITÉ!

Pred použitím stetoskopu si pozorne prečítajte tento Návod na použitie.

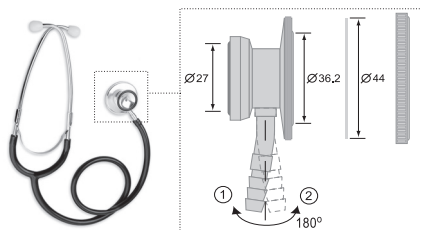
LD Prof-Plus

Popis: stetoskop LD Prof-Plus je fonendoskop na počúvanie Korotkovových tónov, skladá sa z hlavy vo forme membrány s plastovou membránou, spojovacej trubice, binaurálnych trubic a ušných vložiek.

Kompletná sada:

- Stetoskopová hlava (LD-S025) vyrobená z ľahkého kovu s membránou (LD-S023) s priemerom 44 mm – 1 ks.
- Lekárska spojovacia trubica (LD-S020) dlhá 56 cm (možné farby dodávaných trubic: čierna, sivá, červená, modrá, fialová, zelená, žltá) – 1 ks.
- Binaurálne trubicce (LD-S019) – 1 ks.
- Ušné vložky (LD-S066) – 1 sada.

Celkové rozmery balenia, mm: 230 x 120 x 22
Hmotnosť bez obalu, g: 76

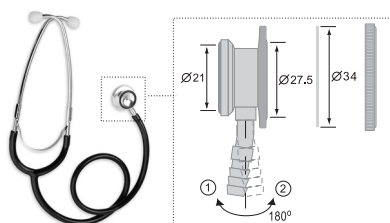
LD Prof-I

Popis: stetoskop LD Prof-I je stetoskop pre lekárov a ošetrovateľský personál, ktorý sa skladá z obojstrannej membránovej hlavy s plastovou membránou a otvoreného zvonu, spojovacej trubice, binaurálnych trubic a ušných vložiek.

Kompletná sada:

- Stetoskopová hlava (LD-S017) – obojstranná z ľahkého kovu s veľkou membránou a otvoreným zvonom – 1 ks. Priemer membrány (LD-S023) je 44 mm. Zvon hlavy má kontaktný gumový krúžok. Priemer zvonu je 27 mm. Jednoduchý a pohodlný mechanizmus na prepínanie medzi zvonom a membránou otáčaním hlavy okolo tyčového ventilu o 180 stupňov. Ohýbanie tyčového ventilu označuje pracovnú stranu hlavy. Poloha 1 nastaví membránu do pracovného stavu, poloha 2 nastaví zvon do pracovného stavu.
- Lekárska spojovacia trubica (LD-S020) dlhá 56 cm (možné farby dodávaných trubic: čierna, sivá, červená, modrá, fialová, zelená, žltá) – 1 ks.
- Binaurálne trubicce (LD-S019) – 1 ks.
- Ušné vložky (LD-S066) – 1 sada.

Celkové rozmery balenia, mm: 230 x 120 x 22
Hmotnosť bez obalu, g: 135

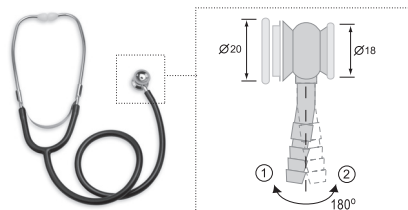
LD Prof-II

Popis: stetoskop LD Prof-II je špecializovaný detský stetoskop ktorý sa skladá z obojstrannej hlavy vo forme membrány s plastovou membránou a otvoreného zvonu, spojovacej trubice, binaurálnych trubic a ušných vložiek.

Kompletná sada:

- Stetoskopová hlava (LD-S028) – obojstranná z ľahkého kovu so zničenou membránou a otvoreným zvonom – 1 ks. Priemer membrány (LD-S024) je 34 mm. Zvon hlavy má kontaktný gumový krúžok. Priemer zvonu je 21 mm. Jednoduchý a pohodlný mechanizmus na prepínanie medzi zvonom a membránou otáčaním hlavy okolo tyčového ventilu o 180 stupňov. Ohýbanie tyčového ventilu označuje pracovnú stranu hlavy. Poloha 1 nastaví membránu do pracovného stavu, poloha 2 nastaví zvon do pracovného stavu.
- Lekárska spojovacia trubica (LD-S020) dlhá 56 cm (možné farby dodávaných rúrok: čierna, červená, modrá, fialová, zelená) – 1 ks.
- Binaurálne trubicce (LD-S019) – 1 ks.
- Ušné vložky (LD-S066) – 1 sada.

Celkové rozmery balenia, mm: 240 x 110 x 40
Hmotnosť bez obalu, g: 95

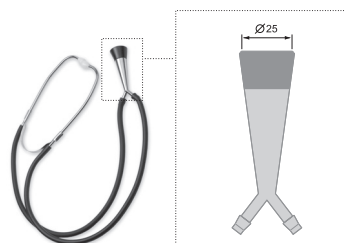
LD Prof-III

Popis: stetoskop LD Prof-III je špecializovaný novorodenecký stetoskop ktorý sa skladá z obojstrannej hlavy vo forme membrány s plastovou membránou a otvoreného zvonu, spojovacej trubice, binaurálnych trubic a ušných vložiek.

Kompletná sada:

- Stetoskopová hlava (LD-S037) – obojstranný ľahký kov s malou membránou a zvonom – 1 ks. Priemer membrány (LD-S040) je 20 mm, priemer zvonu je 18 mm. Jednoduchý a pohodlný mechanizmus na prepínanie medzi membránou a zvonom otáčaním hlavy okolo tyčového ventilu o 180 stupňov. Ohýbanie tyčového ventilu označuje pracovnú stranu hlavy. Poloha 1 nastaví membránu do pracovného stavu, poloha 2 nastaví zvon do pracovného stavu.
- Lekárska spojovacia trubica (LD-S020) dlhá 56 cm (možné farby dodávaných rúrok: čierna, červená, modrá, fialová, zelená) – 1 ks.
- Binaurálne trubicce (LD-S019) – 1 ks.
- Ušné vložky (LD-S066) – 1 sada.

Celkové rozmery balenia, mm: 240 x 110 x 40
Hmotnosť bez obalu, g: 85

LD Prof-IV

Popis: stetoskop LD Prof-IV je špecializovaný pôrodnický stetoskop pozostávajúci zo zvonovitej hlavy, spojovacej trubice, binaurálnych trubic a ušných vložiek.

Kompletná sada:

- Stetoskopová hlava (LD-S038) – ľahká kovová v tvare kužela s plastovým zvonom – 1 ks. Priemer zvonu je 25 mm.
- Lekárske spojovacie trubicce (LD-S039) – dve zvukovo vodivé latexové trubicce s dĺžkou 56 cm (možné farby dodávaných trubic: čierna, modrá, fialová, zelená) – 1 sada.
- Binaurálne trubicce (LD-S019) – 1 ks.
- Ušné vložky (LD-S066) – 1 sada.

Celkové rozmery balenia, mm: 240 x 110 x 40
Hmotnosť bez obalu, g: 115.

Starostlivosť, skladovanie, oprava a likvidácia**! DÔLEŽITÉ!**

1. Stetoskop musí byť chránený pred vysokou vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a nárazmi.
2. Stetoskop neskladujte ani nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti ohrievačov a otvoreného ohňa.
3. Chráňte stetoskop pred znečistením.
4. Kontakt stetoskopu s agresívnymi roztokmi nie je povolený.
5. V prípade potreby vykonajte opravy iba v špecializovaných organizáciách. Adresy organizácií poskytujúcich záručné služby sú uvedené v záručnom liste.
6. Pri likvidácii postupujte podľa platných predpisov vo Vašom regióne. Výrobca nestanovil žiadne osobitné podmienky na likvidáciu.

Záručné povinnosti

1. Tento stetoskop má záručnú dobu 2 roky od dátumu predaja.
 2. Záručné povinnosti sa vydávajú so záručným listom pri predaji prístroja kupujúcemu. Záručný list sa nachádza na poslednej stránke tohto návodu na použitie.
 3. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý zlyhal a/alebo dostal vady z dôvodu: nesprávneho použitia; neopatrného použitia, ktoré viedlo k poškodeniu; modifikácie; opravy neoprávnenou organizáciou (súkromnou osobou); porušenia pravidiel prevádzky a/alebo skladovania a/alebo prepravy; konania tretích strán alebo neprekonateľnou silou.
- Vyžadujte vyplnenie záručného listu obchodnou organizáciou pri kúpe stetoskopu.

DEKÓDOVACIE ZNAKY

CE Súlad so Smernicou Európskej Únie

EC REP Zastupiteľská kancelária v Európskej Únii

Y Výrobca

📖 Dôležité: Prečítajte si Návod na použitie

📅 Dátum výroby: YYYY - rok, MM - mesiac (uvedený na obale)

☔ Chráňte pred vlhkosťou

Dátum výroby: YYYY - rok, MM - mesiac (uvedený na obale) Chráňte pred vlhkosťou.

Dátum vydania tohto Návodu na použitie je uvedený na poslednej stránke vo formulári EXXX/YYMM/NN, kde YY je rok, MM je mesiac a NN je číslo vydania.

VÝROBCA A AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCOVIA

Výroba je certifikovaná podľa medzinárodnej normy ISO 13485.

Vyrába sa pod dohľadom a pre Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza 199591, Singapore.

Výrobca: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Oficiálny zástupca v EÚ: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl). Podrobnejšie informácie na webovej stránke www.littledoctor.sg

Little Doctor

ZÁRUČNÝ LIST

MODEL

SÉRIOVÉ ČÍSLO

ZÁRUČNÁ DOBA

MENO KUPUJÚCEHO

PODPIS KUPUJÚCEHO

DÁTUM PREDAJA

PODPIS PREDÁVAJÚCEHO

VYPLNENÉ ZÁSTUPCOM AUTORIZOVANÉHO SERVISNÉHO STREDISKA

PEČAŤ (PEČIATKA) OBCHODNEJ ORGANIZÁCIE